

# SmartDrive MX2 + PushTracker

## Quickstart Guide


### IMPORTANT!

THE DEFAULT CONTROL MODE OF THE SMARTDRIVE MX2+ HAS CHANGED. IF THIS MODE IS NOT A PROPER FIT, ANOTHER MODE CAN BE SELECTED.

PLEASE READ THE USER'S MANUAL FOR BOTH THE SMARTDRIVE AND PUSHTRACKER BEFORE OPERATING EITHER DEVICE.








ALL WARNINGS AND SAFETY PRECAUTIONS MUST BE HEEDED.

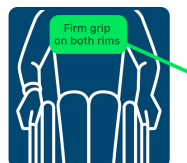

With your SmartDrive powered on, press the left button of the PushTracker to turn power assist ON. You will get a blue light and a vibration.

In MX2+ mode, a DOUBLE tap will START UP the motor and ramp up its speed, and a SINGLE tap will coast at the current speed. Pushes do not power.

TO STOP, perform a DOUBLE tap to deactivate the motor and then grip both handrims to slow down the wheelchair. Other modes will be different.

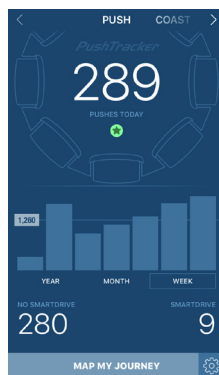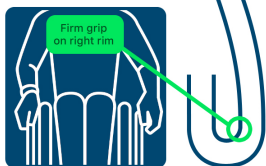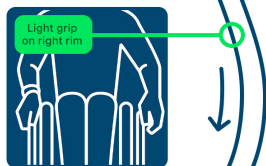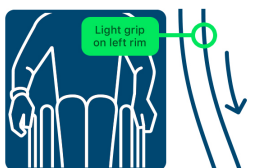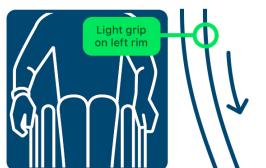

To steer while the motor is driving, lightly grip either handrim to turn in the direction you would like to go. Same as you would without SmartDrive.

To turn while the motor is driving, grip either handrim firmly to make a sharp turn or to turn around completely. Same as you would without SmartDrive.

Be sure to download the PushTracker App from the Apple or Google Play Store on your smartphone.

[www.max-mobility.com](http://www.max-mobility.com)  
[www.pushtracker.com](http://www.pushtracker.com)



# SmartDrive MX2 + PushTracker

## Snelstartgids


### BELANGRIJK!

DE STANDAARD MODUS VAN DE SMARTDRIVE MX2+ IS VERANDERD. ALS DEZE MODUS U NIET GOED PAST KAN EEN ANDERE MODUS WODEN GEKOZEN.

LEES DE HANDLEIDING VAN ZOWEL DE SMARTDRIVE ALS DE PUSHTRACKER VOORDAT U DEZE APPARATEN GEBRUIKT.



ALLE WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSMATREGELEN MOETEN WORDEN OPGEVOLGD.

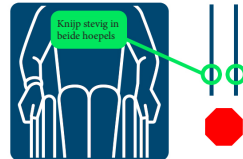

Nederlands





Met uw SmartDrive ingeschakeld, druk op de linker knop van de PushTracker om de ondersteuning AAN te zetten. U krijgt een blauw licht te zien en voelt een trilling.

In MX2+ modus, een DUBBELE tik zal de motor doen OPSTARTEN en de snelheid laten opvoeren, en een ENKELE tik zet de huidige snelheid vast.

Duwen geven geen stroom.

OM TE STOPPEN, maak een DUBBELE tikkende beweging om de motor te deactiveren en pak daarna beide hoepels om de rolstoel af te remmen.

Bij andere modi zal dit anders zijn.

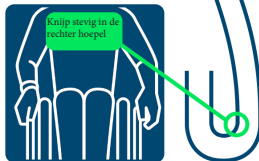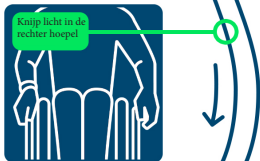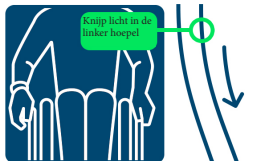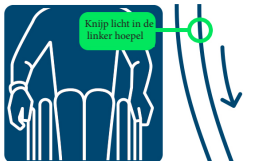


Om te sturen terwijl de motor draait, knijp licht in één van de hoepels om een bocht te maken in de richting die u wilt gaan.

Hetzelfde dat u zou doen zonder SmartDrive.

Om te keren terwijl de motor draait, grijp één van de hoepels stevig vast om een scherpe bocht te maken of volledig om te keren.

Hetzelfde dat u zou doen zonder SmartDrive.

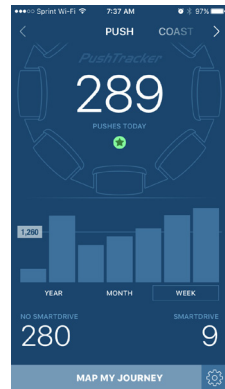

Zorg ervoor dat u de PushTracker App download van de Apple of Google Play Store op uw smartphone.

[www.max-mobility.com](http://www.max-mobility.com)  
[www.pushtracker.com](http://www.pushtracker.com)



Download on the  
App Store



ANDROID APP ON  
Google play

# SmartDrive MX2 + PushTracker

## Guide de démarrage rapide

### IMPORTANT!

LE MODE DE COMMANDE PAR DÉFAUT DU SMARTDRIVE MX2+ A CHANGÉ. SI CE MODE NE VOUS CONVIENT PAS, VOUS POUVEZ EN SÉLECTIONNER UN AUTRE.

VEUILLEZ LIRE LE MANUEL D'UTILISATION DU SMARTDRIVE ET DU PUSHTRACKER AVANT D'UTILISER L'UN DES DEUX DISPOSITIFS.



TOUS LES AVERTISSEMENTS ET MESURES DE SÉCURITÉ DOIVENT ÊTRE PRIS EN COMPTE.





Après avoir allumé votre SmartDrive, appuyez sur le bouton de gauche sur le PushTracker pour activer l'assistance électrique. Un voyant bleu s'allume et des vibrations sont générées.

En mode MX2+, appuyez DEUX FOIS pour DÉMARRER le moteur et le faire monter en régime. Appuyez UNE SEULE FOIS pour avancer en roue libre en maintenant la vitesse actuelle.

Pousser ne permet pas d'avancer.


POUR VOUS ARRÊTER, appuyez DEUX FOIS pour désactiver le moteur, puis attrapez les deux mains courantes afin de ralentir le fauteuil roulant.

Les autres modes fonctionnent différemment.

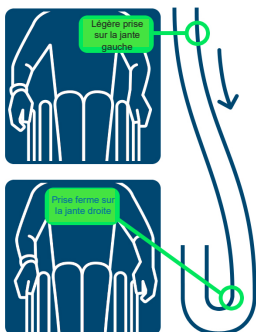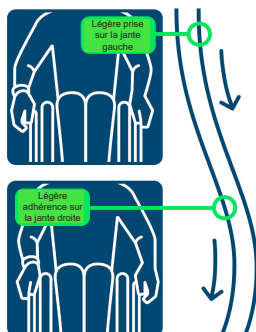

Pour diriger le fauteuil pendant que le moteur est en marche, attrapez légèrement l'une des mains courantes pour tourner dans la direction où vous souhaitez aller. Procédez comme vous avez l'habitude de faire sans le SmartDrive.

Pour tourner pendant que le moteur est en marche, attrapez l'une des mains courantes fermement pour prendre un virage serré ou pour vous retourner complètement. Procédez comme vous avez l'habitude de faire sans le SmartDrive.

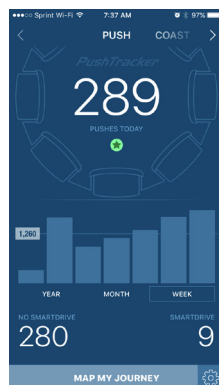

Assurez-vous d'avoir téléchargé l'application PushTracker sur Apple ou Google Play Store sur votre smartphone.

[www.max-mobility.com](http://www.max-mobility.com)  
[www.pushtracker.com](http://www.pushtracker.com)



# SmartDrive MX2 + PushTracker

## Snabbstartsguide

### VIKTIGT!

SMARTDRIVE MX2+ STANDARDKONTROLLÄGE HAR ÄNDRATS. OM DETTA LÄGE INTE PASSAR DIG, KAN ETT ANNAT LÄGE VÄLJAS.

LÄS ANVÄNDARMANUALEN FÖR BÅDE SMARTDRIVE OCH PUSH-TRACKER INNAN DU ANVÄNDER NÅGON AV DESSA.



ALLA VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER MÅSTE FÖLJAS.







Svenska

Med SmartDrive på, tryck på PushTrackers vänstra knapp för att sätta på strömmen (ON). Det kommer då lysa blått och vibrera.


I MX2+-läget STARTAR du motorn och ökar farten med en DUBBELKNACKNING, och en ENKELKNACKNING håller farten. Knuffar ger ingen kraft.

För att STANNA, gör en DUBBELKNACKNING för att avaktivera motorn och greppa sedan båda drivringarna för att sänka farten på rullstolen. Andra lägen fungerar annorlunda.

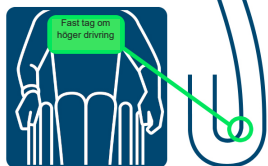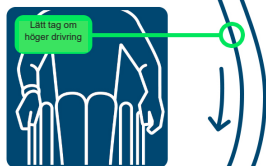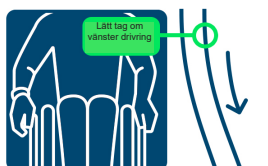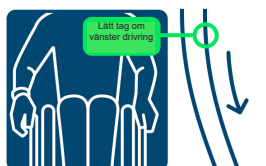

För att styra medan motorn är igång, greppa lätt drivringen på den sidan för att svänga åt det håll du vill åka. Detta fungerar på samma sätt som utan SmartDrive.

För att svänga medan motorn är igång, greppa drivringen på den sidan ordentligt för att göra en kraftig sväng eller för att svänga runt helt. Detta fungerar på samma sätt som utan SmartDrive.

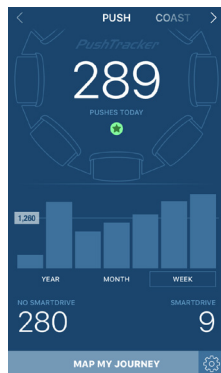

Se till att ladda hem PushTracker-appen från Apple eller Google Play Store på din smartphone.

[www.max-mobility.com](http://www.max-mobility.com)  
[www.pushtracker.com](http://www.pushtracker.com)



Download on the  
App Store



ANDROID APP ON

Google play

# SmartDrive MX2 + PushTracker

## Schnellstartanleitung

### WICHTIG!

DER STANDARDKONTROLLMODUS FÜR DEN SMARTDRIVE MX2+ IST NEU. WENN DER MODUS NICHT RICHTIG PASST, KANN EIN ANDERER MODUS AUSGEWÄHLT WERDEN.

BITTE LESEN SIE SICH DIE GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR SMARTDRIVE UND PUSHTRACKER DURCH, BEVOR SIE DIE GERÄTE VERWENDEN.






ALLE WARNUNGEN UND SICHERHEITSMASSNAHMEN MÜSSEN BEACHTET WERDEN.



Wenn der SmartDrive aktiviert ist, drücken Sie auf den linken Knopf am PushTracker, um den Kraftverstärker einzuschalten [ON]. Sie sehen ein blaues Licht und spüren Vibration.

In MX2+ Modus wird der Motor durch **DOPPELTES** Antippen gestartet und beschleunigt, während er bei **EINMALIGEM** Antippen auf der aktuellen Geschwindigkeit rollt. Ein Anstoßen schaltet den Motor nicht ein.

ZUM STOPPEN nochmals **DOPPELT** antippen, um den Motor auszuschalten und dann den Rollstuhl durch Greifen beider Handläufe anhalten. Andere Modi sind etwas anders.

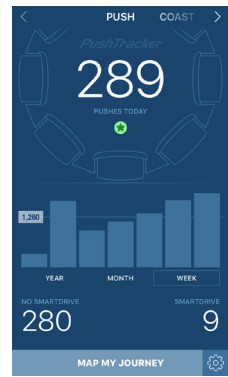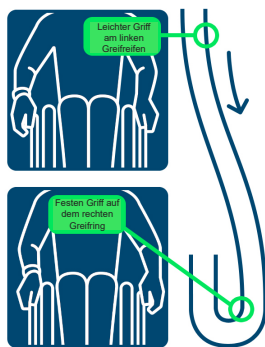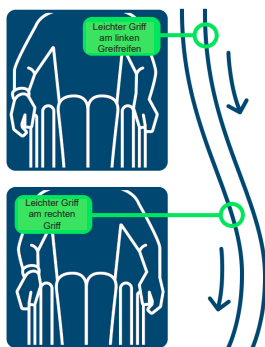

Um den Rollstuhl bei laufendem Motor zu lenken, greifen Sie leicht den entsprechenden Handlauf in die gewünschte Richtung. wie Sie es auch ohne SmartDrive machen würden.

Um bei laufendem Motor zu wenden, greifen Sie einen Handlauf fest an, um eine scharfe Wendung zu machen oder ganz umzukehren. wie Sie es auch ohne SmartDrive machen würden.

Achten Sie darauf, die PushTracker App von Apple oder Google Play Store auf Ihr Smartphone herunterzuladen.

[www.max-mobility.com](http://www.max-mobility.com)  
[www.pushtracker.com](http://www.pushtracker.com)



Deutsche

# SmartDrive MX2 + PushTracker

## Sammenfattet vejledning

### VIGTIGT!

DEN NORMAL BETJENINGSTILSTAND FOR SMARTDRIVE MX2+ HAR ÆNDRET SIG.  
HVIS DENNE TILSTAND IKKE PASSER TIL BRUGEREN, KAN MAN VÆLGE EN ANDEN TILSTAND.

LÆS BRUGERVEJLEDNINGERNE TIL BÅDE SMARTDRIVE  
OG PUSHTRACKER, FØR EN AF ENHEDERNE BRUGES.



ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER SKAL OVERHOLDES.








Tryk på den venstre knap på PushTracker med tændt SmartDrive for at slå hjælpemotoren TIL. Man ser et blåt lys og mærker en vibration.

I MX2-tilstand STARTER en DOBBELT berøring motoren og øger den hastighed, og en ENKELT berøring kører på frihjul med den aktuelle hastighed. Skub driver ikke enheden.

Brug en DOBBELT berøring til at deaktivere motoren for AT STOPPE, og grib så om begge drivringe for at sætte farten ned. Andre tilstande vil være forskellige.

Dansk

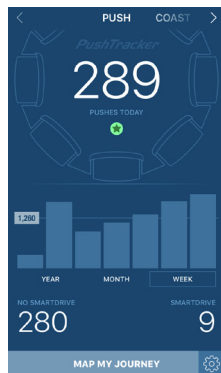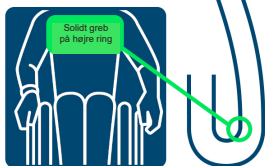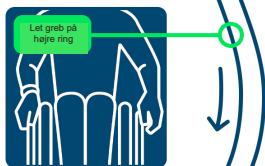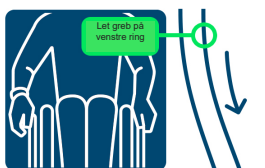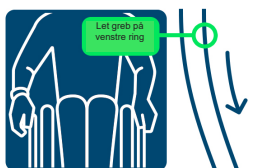

Grib let om begge drivringe for at styre, mens motoren kører og dreje i den retning, som du ønsker at køre. På samme måde som du ville gøre uden SmartDrive.

Grib fat om begge drivringe på en solid måde for at vende, mens motoren kører, og dreje skarpt eller vende dig helt om. På samme måde som du ville gøre uden SmartDrive.

Sørg for at downloade PushTracker App fra Apple eller Google Play Store på din smartphone.

[www.max-mobility.com](http://www.max-mobility.com)  
[www.pushtracker.com](http://www.pushtracker.com)



Download on the  
App Store



ANDROID APP ON

Google play

# SmartDrive MX2 + PushTracker

## Hurtigstarts-guide

### VIKTIG!

NORMALINNSTILLINGENE TIL KONTROLLMODUS FOR SMARTDRIVE MX2+ HAR BLITT ENDRET. HVIS DETTE MODUS IKKE PASSER, KAN ET ANNET MODUS BLI VALGT.

LES BRUKERMANUALEN TIL BÅDE SMARTDRIVE OG PUSHTRACKER FØR DU BRUKER NOEN AV DEM.








VÆR OPPMERKSOM PÅ ALLE ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER.



Mens din SmartDrive er på, trykker du på den venstre knappen på PushTracker for å skru drivhjelpen PÅ. Du vil få et blått lys og en vibrasjon.

I MX2+ modus vil et DOBBELT tapp STARTE OPP motoren og øke farten, mens et ENKELT tapp vil vedlikeholde nåværende hastighet. Skyv vil ikke gi kraft.

FOR Å STOPPE, utfør et DOBBELT tapp for å deaktivere motoren og grip deretter begge drivringer for å senke farten på rullestolen. Det vil være annerledes i andre modus.

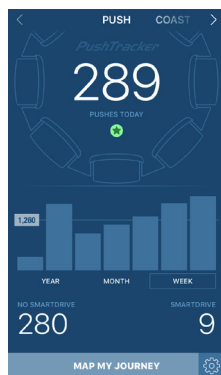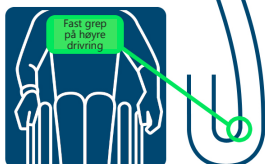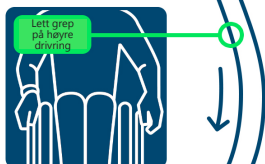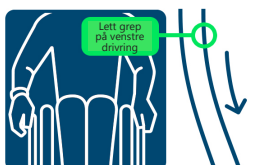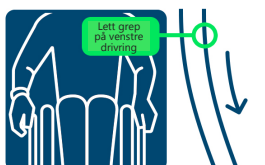

For å styre mens motoren er i drift, grip lett i den ene drivringen for å snu i den retningen du ønsker. På samme måte som uten SmartDrive.

For å snu mens motoren er i drift, grip hardt i den ene drivringen for å utføre en skarp sving eller for å snu deg helt. På samme måte som uten SmartDrive.

Last ned PushTracker-Appen til din smarttelefon fra Apple eller Google Play Store.

[www.max-mobility.com](http://www.max-mobility.com)  
[www.pushtracker.com](http://www.pushtracker.com)



Norsk

# SmartDrive MX2 + PushTracker

## Guida rapida

### IMPORTANTE!

LA MODALITÀ DI CONTROLLO PREDEFINITA DELLO SMARTDRIVE MX2+ È STATA MODIFICATA. SE QUESTA MODALITÀ NON È QUELLA ADATTA, SELEZIONARNE UN’ALTRA.

LEGGERE IL MANUALE DELL’UTENTE DELLO SMARTSRIVE E DEL PUSHTRACKER PRIMA DI UTILIZZARE I DISPOSITIVI.



PRESTARE ATTENZIONE A TUTTI GLI AVVERTIMENTI E PRECAUZIONI DI SICUREZZA.






Italiano

Con SmartDrive acceso, premere il tasto sinistro del PushTracker per ATTIVARE il Power Assist. Si accenderà una spia blu e ci sarà una vibrazione.

In modalità MX2+, una DOPPIA spinta ACCENDERÀ il motore e aumenterà la velocità, mentre una spinta SINGOLA consentirà di procedere alla velocità corrente in modo libero. Le spinte non danno alimentazione.

PER FERMARSI, eseguire una DOPPIA spinta per spegnere il motore, quindi afferrare entrambi i corrimano per rallentare la carrozina. Altre modalità saranno diverse.

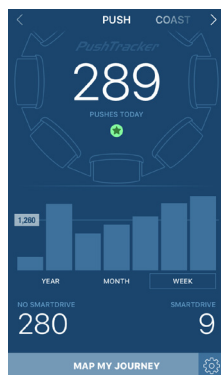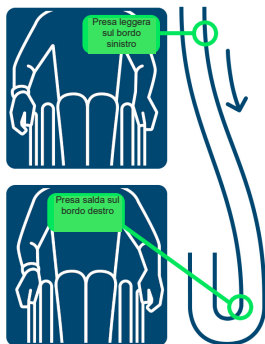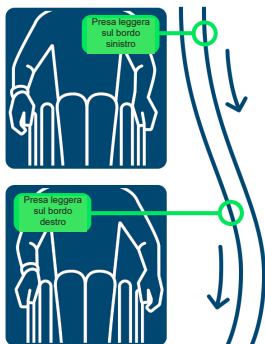

Per guidare mentre il motore è acceso, prendere con delicatezza il corrimano per andare nella direzione desiderata. Lo stesso senza SmartDrive.

Per girare durante la guida, impugnare saldamente il corrimano per cambiare direzione o girare completamente. Lo stesso senza SmartDrive.

Verificare di scaricare l'applicazione PushTracker da Apple o Google Play Store sullo smartphone.

[www.max-mobility.com](http://www.max-mobility.com)  
[www.pushtracker.com](http://www.pushtracker.com)



Download on the  
App Store



ANDROID APP ON  
Google play